


AEDの取り出し易さを追求しました

実用新案  
申請済

両開き自立式屋内型AED収納ボックス AED110KB

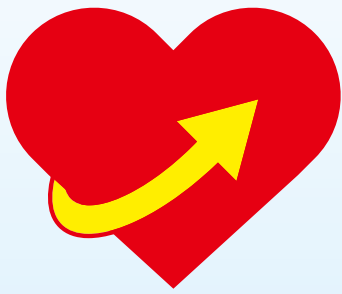

# AED REVERSAL AED BOX

今まで無かった発想!

左右どちらの開閉にするか、設置時に選択できます。

両開き自立式屋内型AED収納ボックス  
型番:AED110KB

狭い場所でも  
邪魔にならない

BAD

隣にモノがあっても  
ぶつからない

GOOD

GOOD

屋内型AED収納ボックスと自立型スタンドの組立て状態

回転させることで  
開閉方向を決めて  
設置できます!



左開き設置時

- ※設置向きを確定後、購入者様でシール貼り付けなど行っていただきます。
- ※扉向きに関係上、ボックス部分とスタンド・土台部分の組立ては購入者様で行っていただきます。
- ※スタンド部分は前後逆に設置できます。
- ※製品のデザイン、仕様などが変更となる場合がございます。



右開き設置時

## 仕様

寸法(単位:mm)	ボックス部分 : H:455 W:420 D:200 (突起物を除く) スタンド部分 : H:996.8 W:420 D:200 土台部分 : T:3.2 W:500 D:500 全長サイズ : H:1455
質量	28.5kg以下
特徴	ボックス部分 :設置時に扉の右開き/左開きの選択が可能 土台部分 :土台穴(外側、内側の二種類)を利用したアンカーボルト固定による転倒防止が可能
警告ブザー	扉開時:ブザー鳴動 扉閉時:ブザー停止 ブザー音量:100db(単4電池2本使用)
付属品	シール3枚(正面用×1 側面用×2)、天面穴キャップ×4、 背面穴キャップ×4、組立て用ビス×4
固定方法	外穴・内穴13φ×4の穴を利用し、アンカーボルト等で床面固定
標準小売価格(税別)	¥53,000

## 各オプション

※オプションの他、機能追加のご要望につきましてはお気軽にご相談下さい。  
※キースイッチの制御内容につきまして、仕様の変更等ご要望がございましたら別途ご相談下さい。

品名	型番	用途/仕様	標準小売価格(税別)
レベル調整	AED110C	水平の調整機能がついた土台に変更 ※アンカー固定箇所は外側の土台穴のみ ※受注生産品	(1台ご注文の場合の単価) ¥30,800
			(10台ご注文の場合の単価) ¥11,800
AED固定バンド	AED110L	AEDを面ファスナーバンドにより転倒落下防止	¥2,400
バトランプ	AED110P	扉開時:ブザー鳴動と共にバトランプ点滅 扉閉時:ブザー停止と共にバトランプ消灯 ※バトランプと付属ドアスイッチ取付に伴いブザーが通常品とは異なります。 ※単3電池8本使用します。	¥19,800
キースイッチ	AED110Q	ON時:通常動作 OFF時:扉を開けてもブザー鳴動しない ※キースイッチと付属ドアスイッチ取付に伴いブザーが通常品とは異なります。 ※単3電池8本使用します。	¥19,800
バトランプ + キースイッチ	AED110PQ	上記バトランプとキースイッチの両機能搭載	¥32,000
110KB組立て	—	当社にてボックス部分とスタンド・土台部分の組立て後、 配送(組立て代行) ※通常は購入者様により組立てを行っていただきます。 ※組立てご依頼の際は、扉向き指示が必要です。	¥5,200

## 各オプション外観

※製品のデザイン、仕様などが変更となる場合がございます。



バトランプ



レベル調整



AED固定バンド



キースイッチ

企画・製造

**ID** 飯田電子設計株式会社 [www.i-da.co.jp](http://www.i-da.co.jp)

本社 〒174-0046  
東京都板橋区蓮根1-8-23  
TEL : 03-3968-4455 FAX : 03-3968-4420  
mail: info@i-da.co.jp

福島工場 〒966-0902  
福島県喜多方市松山町村松字上原2483-5  
TEL : 0241-23-1925 FAX : 0241-24-2419

● お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ