


小型で軽量な屋外ボックス!

## 外気緩和 屋外型AED収納ボックス AED400K / AED400KB

軽量・コンパクトでも  
あんしんの防水防塵性能

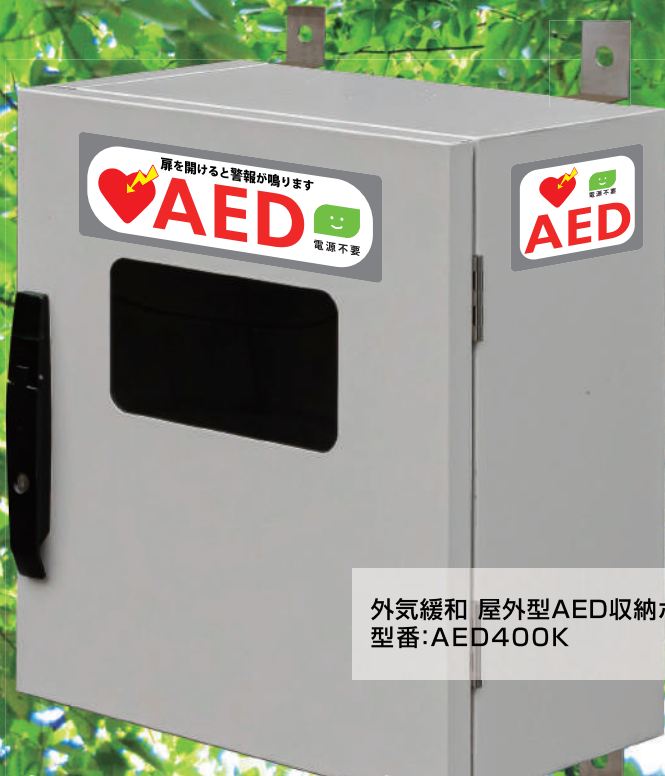

外気緩和 屋外型AED収納ボックス  
型番:AED400K



外気緩和 屋外型AED収納ボックス  
型番:AED400KB

外気の暑さ寒さを伝えにくい  
断熱機能

※直射日光下・寒冷地を避けて設置して下さい

どんな  
構造?

断熱材による二重構造で  
外気温の伝達を緩やかに

どんな  
性能?

防水防塵性能はIP55級を  
クリアのあんしん設計

どんな  
場所に?


電源不要・コンパクトなので  
設置場所の可能性が広がる

※機能追加のご要望につきましてはお気軽にご相談下さい

## 仕様

	AED400K	AED400KB
タイプ	壁掛式	自立式
価格(税別)	¥79,800	¥139,800
寸法(単位:mm) ※突起部を除く	ボックス部分：H400 W375 D208	ボックス部分：H400 W375 D208 スタンド部分：H550 W375 D208 土台部分：H50 W400 D400 ※自立総高:1,000mm
質量	7.5kg以下	20kg以下
電源	不要	
塗装仕上	本体：スチール製 下地：防錆下地処理 表面：粉体焼付塗装	
AED保管温度(低温)	板金と断熱材による二重構造と気密機構により外気温の影響を緩やかにする	
AED保管温度(高温)		
警告ブザー(動作)	扉開時：ブザー鳴動 扉閉時：ブザー停止 (単4電池2本使用)	
警告ブザー(音量)	100dB	
固定用付属品	付属なし ※施工場所の壁面状況により適切な固定方法をご検討下さい	レベリングスクリュー、固定用金具付属
固定方法	壁面アンカーボルト固定	床面アンカーボルト固定
防水防塵性能	IP55級クリア	IP55級クリア

## 性能試験

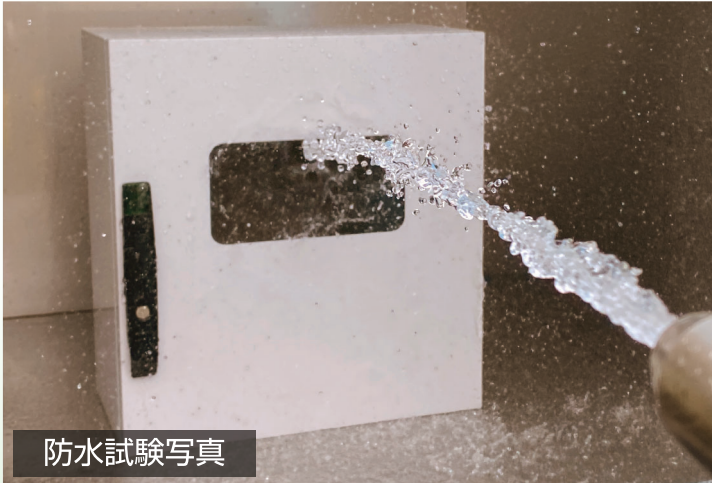

防水試験写真


IEC60529規格の散水装置を用いて3mの距離から全方向より12.5ℓ/分、30kpa以上の噴流水を3分間散水。

### 防水等級:IPX5

いかなる方向からの水の直接噴流によっても製品に有害な影響を与えない「防噴流形」をクリアしています。

### 防塵等級:IP5X

粉塵から機器を守る防塵等級をクリアしています。

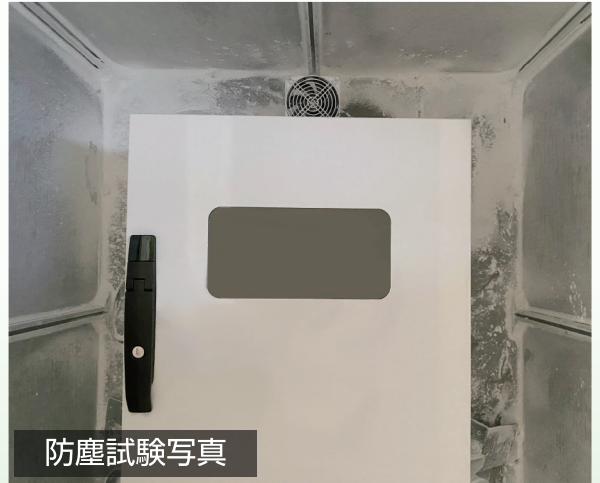

防塵試験写真

粉塵対流装置を用いてIEC60529規格のタルク粉浮遊状態とした試験機内に8時間設置。

## 自立式施工例

コンクリート板を使った施工方法もご提案できます。



※商品の色合いは、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。  
商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

企画・製造

**ID** 飯田電子設計株式会社 <https://i-da.co.jp>

本社 〒174-0046  
東京都板橋区蓮根1-8-23  
TEL：03-3968-4455 FAX：03-3968-4420  
mail: info@i-da.co.jp

福島工場 〒966-0902  
福島県喜多方市松山町村松字上原2483-5  
TEL：0241-23-1925 FAX：0241-24-2419

● お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ